

Anigen Rapid

FCoV Ab

Información General

Objetivo: Detección de anticuerpos del Coronavirus Felino

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Sangre entera, plasma o suero

Materiales:

- Dispositivos para prueba rápida Anigen FCoV Ab
- Tubos con Anticoagulante
- Tubos de ensayo con diluyente
- Tubos capilares desechables

Características especiales:


- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 96.0 % vs. IFA
- Especificidad: 97.9 % vs. IFA



◆ **Como hacer diagnósticos de FIP con la prueba rápida FCoV Ab**

- Muchos gatos aparentemente sanos y gatos con otras condiciones distintas a la FIP pueden resultar positivos a la prueba de anticuerpos
- Algunos gatos con FIP efusiva parecen tener títulos bajos o pueden resultar negativos a la prueba de FCoV Ab
- Las pruebas de FCoV Ab solo deben usarse para diagnosticar FIP en conjunción con un historial compatible, signos clínicos, así como un examen de la hemorragias, concentraciones altas de inmunoglobulinas o bien una relación A:G baja.

Procedimiento

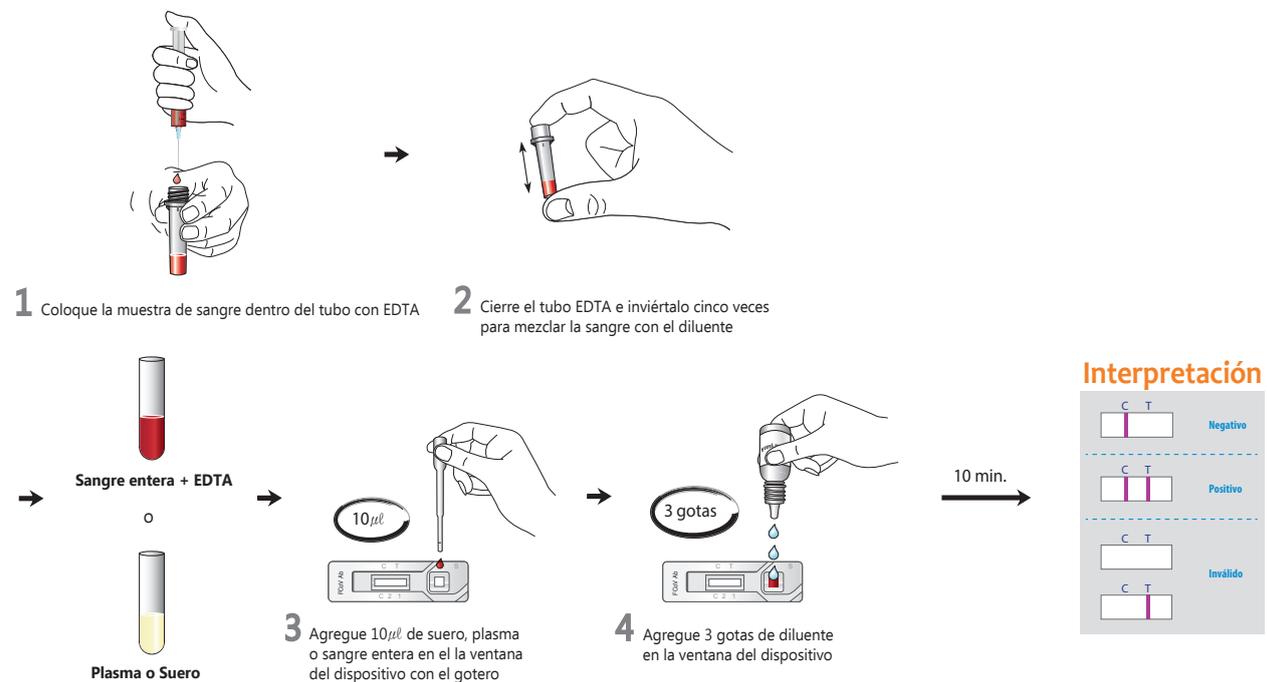

Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RB2203DD	FCoV Ab	Dispositivo	10 Pruebas/Kit

BIONOTE, INC.

